

NeoKings

Soluciones en implantología

NK3



SISTEMA DE IMPLANTE CM

NeoKings S.A.S. 29/08/2025
Tucumán 1763, Morón (CP.1712)
Buenos Aires, Argentina
Venta telefónica:
Arg: +549 1138035870
LATAM: +549 1168348015

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



/neokingsarg



/info@neokings.com.ar

Presione el título para dirigirse a la página directamente

<i>Implante NK3.....</i>	<i>3</i>
<i>Conexion Conométrica</i>	<i>4</i>
<i>Packaging Implante NK3.....</i>	<i>5</i>
<i>Especificación Implante NK3.....</i>	<i>7</i>
<i>Cicatrización</i>	<i>8</i>
<i>Pilares Flujo Analógico</i>	<i>9</i>
<i>Pilares Flujo Digital</i>	<i>11</i>
<i>Pilar Unitario CM</i>	<i>12</i>
<i>Pilar Multi Unit CM.....</i>	<i>13</i>
<i>Pilar Micro Multi Unit</i>	<i>14</i>
<i>Prótesis Removible</i>	<i>15</i>
<i>Kit quirúrgico PRO MAX NK3.....</i>	<i>16</i>
<i>NeoGuide</i>	<i>17</i>
<i>Instrumental y accesorios</i>	<i>18</i>



Diseño coronal

Gracias a su diseño de cono invertido, reduce el **estrés**, evitando la reabsorción ósea. Mejora la estética optimizando el volumen de hueso y tejido blando en la área. Las microranuras aumentan significativamente el contacto implante-hueso (BIC).

Espira de paso doble

Aumenta el contacto implante-hueso (BIC) en todo el cuerpo. También multiplica el índice de inserción del implante, permitiendo una inserción rápida y sencilla.



Morfología cónica

Forma de raíz, diseñado para generar una alta **estabilidad primaria**. Apto para múltiples tipos de hueso, adaptando el protocolo de fresado.

Perfil de rosca

Altamente **compresivo**, generando un buen contacto implante-hueso (BIC).
Diseño de rosca variable; fina en el ápice y progresiva para una elevada estabilidad del implante.
Roscas apicales profundas para una fijación inmediata y mejora de estabilidad primaria.



50.000X (2µm)

Superficie NeoTite

Tratamiento de tipo SLA (Sandblasted, Large grit, Acid.etched). Consiste en blastinado con partículas abrasivas y doble grabado ácido térmico. Genera una topografía microestructurada con microporos homogéneos de entre 1 y 5µm. Optimiza la osteointegración incrementando el contacto del implante y el tejido óseo.


Fresado autoroscante

Genera un **perfil de corte**, haciendo que no sea necesario el uso de machos de rosca. El doble fresado estabiliza el autoroscado. Aporta una mejora en la **estabilidad primaria**.



Ápice plano

Proporciona un excelente **anclaje óseo** favoreciendo la **estabilidad primaria**. Especialmente en procesos de post-extracon. Genera un efecto **autopercutor**.

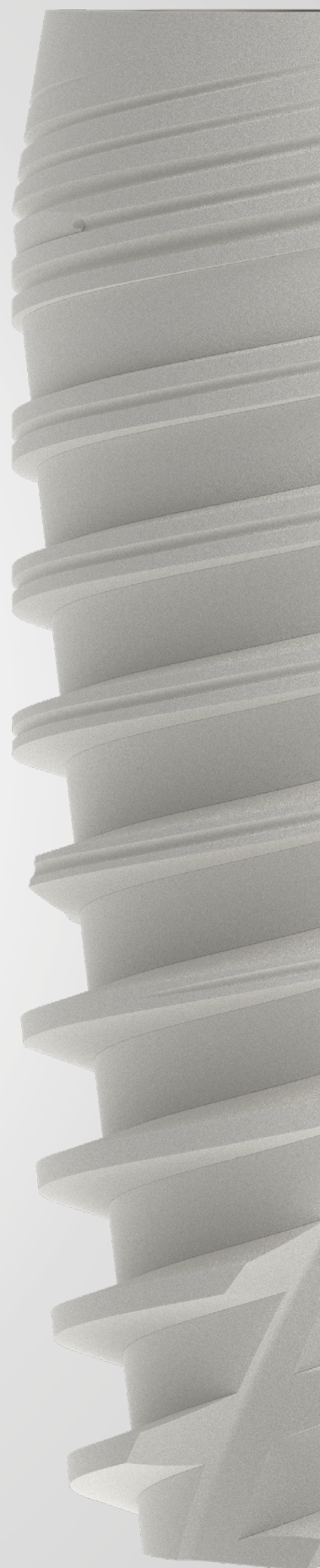

Filosofía Biológica y Diseño CM

Imita la relación natural diente-tejido, lo que permite alcanzar una estética y estabilidad duradera. En este contexto, la altura crítica recomendada -de 4mm desde la plataforma al borde gingival- se presenta como un factor clave para la preservación de los tejidos blandos y una biomecánica óptima.

Técnica “One Abutment - One Time”

Compatible con la conexión CM, permite colocar el pilar definitivo desde el acto quirúrgico.

Esta estrategia ofrece múltiples ventajas:

- Preserva el sello biológico.
- Minimiza los traumas en los tejidos blandos.
- Mejora la predictibilidad tanto estética como funcional.

Perfil Crítico y Subcrítico

- Perfil crítico: Su diseño permite controlar la estética final.
- Perfil subcrítico: Favorece el ingreso y anclaje del tejido conectivo.

El sistema CM permite personalizar ambos perfiles, optimizando la altura gingival y la salud periimplantaria desde la etapa quirúrgica.

Plataforma Switch

- Desplazamiento horizontal $\geq 0,4\text{mm}$ entre implante y aditamento.
- Impacto biomecánico:
 - Disloca fuerzas paraxiales.
 - Aleja el micro gap del hueso crestral.
- Beneficios clínicos:
 - Preservación ósea hasta un 70% más efectiva.
 - Mejora estética gingival.
 - Prevención de periimplantitis.


Conexión Conométrica 11,5°

- Unión por fricción (“soldadura en frío”) elimina micro gaps y micro movimientos. Previene aflojamientos.

- Beneficios clínicos:
 - Menor infiltrado bacteriano
 - Reducción de reabsorción ósea marginal
 - Alta estabilidad; Ideal para técnica One abutment - One time.

Complementos de Sistema

- Hexágono de indexación: posicionamiento preciso y eficiente.
- Sistema protésico CM: amplia gama de pilares para restauraciones unitarias, múltiples, cementadas o atornilladas
- Medidor de altura gingival: facilita la selección de componentes según el espesor del tejido.

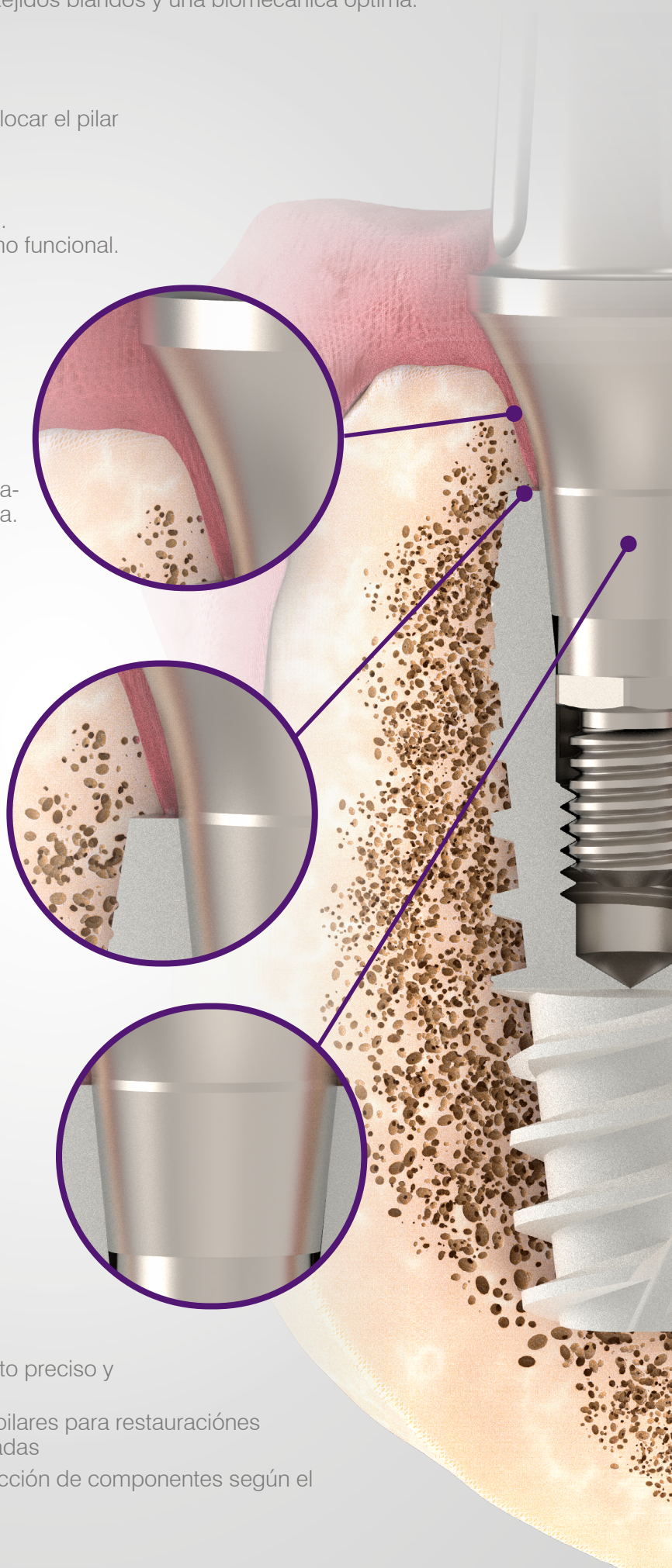

Facilidad y seguridad al extraer el implante

Mejora la experiencia en la colocación.

Tapa con doble sellado

Asegura la estanqueidad del implante y la esterilización a largo plazo.

Tapa de cierre

Incluida con el implante.
Altura 2mm para colocación subcrestal.
Opcional altura H0 (se compra por separado)


Implante

Siempre en contacto con titanio para evitar contaminaciones con otros materiales.

Buje

Fabricado en titanio Gr. 4.
Mantiene la posición del implante.

La traba interna mantiene la posición del implante evitando la rotación para una correcta extracción del mismo con menor fricción, fuerza y roce.

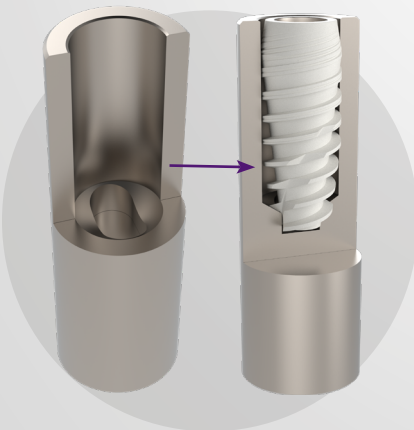

Llave de transporte



COD: PQ035A - Corto

COD: PQ035A - Largo



Procedimiento

- 1 Sostenga el buje de titanio, el cual contiene el implante esterilizado.
- 2 Retire suavemente la tapa plástica para evitar que el implante pueda caerse.
- 3 Introduzca la llave de transporte y gírela suavemente hasta hacer el tope a fondo con el implante.



Envase de implante Neokings

NK3 Conexión Cono Morse

En Neokings seguimos evolucionando para ofrecer soluciones seguras y prácticas a los profesionales. Nuestro nuevo packaging es un avance en diseño, seguridad y esterilidad, optimizando la experiencia en quirófano y la confianza en cada procedimiento.

La **nueva caja compacta** facilita almacenamiento, logística e identificación. La **faja de seguridad** asegura que el implante no haya sido abierto, manipulado ni utilizado. La **esterilización** fue extendida a 5 años, ofreciendo respaldo y tranquilidad.



El **doble tubo** transparente protege frente a contaminaciones externas, mientras que la **vaina metálica** de titanio evita el contacto con otros materiales y micropartículas contaminantes, asegurando condiciones óptimas para la oseointegración.

Cada detalle de este envase fue pensado para **resguardar la integridad del implante** y **simplificar el trabajo clínico**, reforzando el compromiso de Neokings con la innovación y la excelencia.

Instrucciones de uso:



1 Sujete el tubo secundario con una mano y **abrir la tapa** con la otra, empujando con el dedo hacia arriba.



2 Retire el tubo primario que contiene el implante.



3 Girar la tapa del tubo primario para liberar la presión y abrir.



4 Separar la tapa tirando hacia arriba.




5 Sostener el buje de cristal y retirar la tapa plástica suavemente.

⚠ Mantenga el buje en vertical para evitar caídas.



6 Colocar la tapa plástica sobre la mesa. Dentro está la tapa de cierre para cirugía.

⚠ Mantenga siempre el buje en la mano.

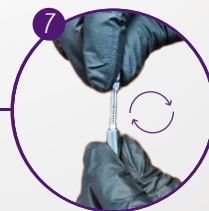

7 Introducir la llave de transporte y girar suavemente hasta hacer tope.



✓ Tope correcto: El transportador encastra completamente en el implante.

⚠ Verificar la correcta colocación del transportador.



✗ Tope incorrecto: El transportador NO llega al fondo, queda trabado antes de encastrar.



Retirar la llave hacia arriba y llevar el implante a boca.



Deseche el buje de titanio.

Medidas del implante NK3

	Ø3,30	Ø3,75	Ø4,20	Ø5,00
A	Ø3,7	Ø3,85	Ø4,20	Ø4,95
B	Ø2,55	Ø2,9	Ø3	Ø3,3
C	Ø1,55	Ø2	Ø2,1	Ø2,6
D	Ø2,5	Ø2,5	Ø2,5	Ø2,5
Largos				
8,5mm		✓	✓	✓
10mm	✓	✓	✓	✓
11,5mm	✓	✓	✓	✓
13mm	✓	✓	✓	✓
15mm	✓	✓	✓	✓

>Ø3,30 mm - Incisivos
centrales y laterales



>Ø3,75 mm - Caninos
y Premolares



>Ø4,20 mm - Premolares y
molares




>Ø5,00 mm - Molares



Aplicación	Torque sugerido
Post-extracción (implante sumergido sin carga)	Mínimo: 20 N.cm
Carga diferida (entre 3 y 4 meses de cicatrización)	Mínimo: 20 N.cm
Provisionalización inmediata (Elemento que no entra en función)	35 N.cm
Carga inmediata (Elemento que entra en función)	45 N.cm
Torque ideal	45 a 60 N.cm
Torque máximo	70 N.cm

Indicaciones de uso clínico

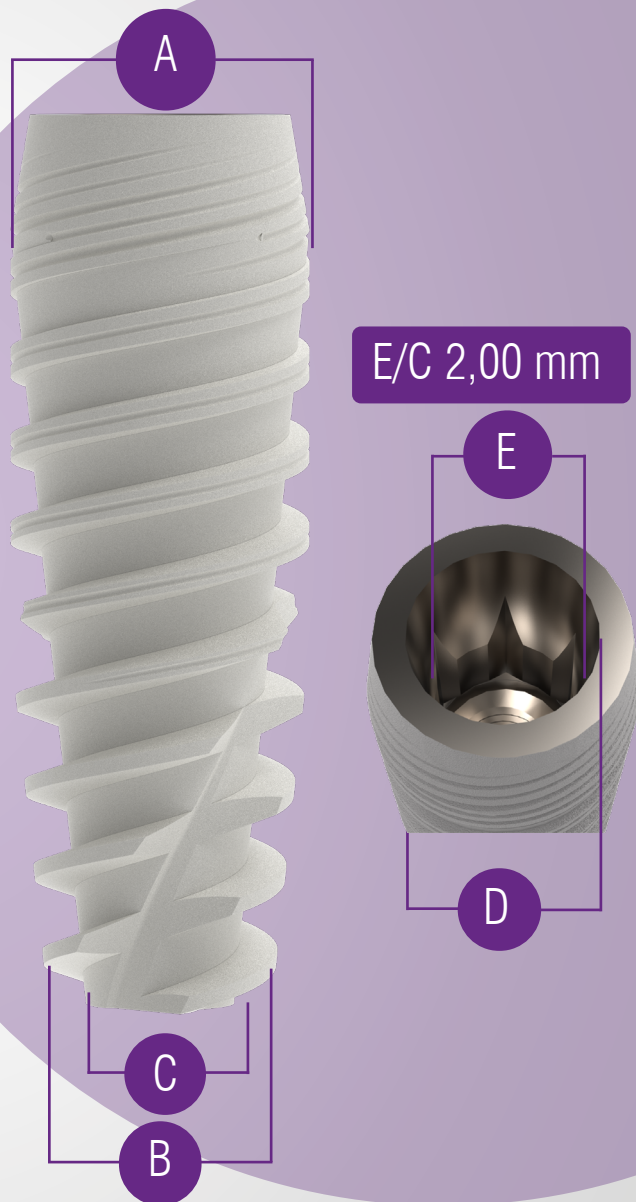

Instrumental de colocación

Llave de Transporte





COD: PQ035A - Corto
COD: PQ036A - Largo

Llave de Transporte
p/ Contraangulo



COD: D0016A

Instrumental de colocación

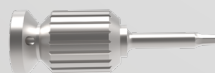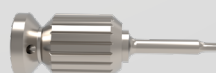
Destornillador manual 0,048" COD: DM003A - Corto
COD: DM004A - LargoDestornillador manual 0,035" COD: DM001A - Corto
COD: DM002A - Largo

Etapa de cicatrización

Tapa de Cierre

0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
TP006A	H0
TP007A	H2

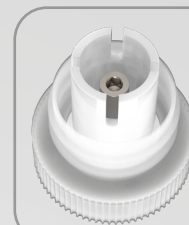

El implante incluye la tapa de cierre TP007A de altura gingival 2mm en el reverso de la tapa de packaging.

Cicatrizal Ø3,30

0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
CI088A	0,8
CI089A	1,5
CI090A	2,5
CI091A	3,5
CI092A	4,5
CI093A	5,5
CI094A	6,5

Cicatrizal Ø4,50

0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
CI095A	0,8
CI096A	1,5
CI097A	2,5
CI098A	3,5
CI099A	4,5
CI100A	5,5
CI101A	6,5

Cicatrizal de Peek Ø4,80

0,035"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
CI103A	1,5
CI104A	2,5
CI105A	3,5
CI106A	4,5
CI107A	5,5
CI108A	6,5

Tornillo M1,80 Corto

Hex. 0,035"
COD: TR047Tornillo correspondiente *solo* a Cicatrizal de Peek y Pilar Angulado Multi Unit

0,035"

Provisorio
COD: PR159A0,035"
Torque manual:
10 N.cm

Tornillo Protético M1,80

Hex 0,035"
COD: TR045

Tornillo correspondiente a Provisorio, Pilar Recto, Pilar Angulado y Ti Base.

0,035"

Provisorio de Pilar Ø3,30



Código	Altura de Muñón [mm]
UC035A	H4
UC036A	H6

Provisorio de Pilar Ø4,50



Código	Altura de Muñón [mm]
UC037A	H4
UC038A	H6

Cemento-atornillado

Pilar Recto Ø3,30
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR120A	0,8
PR121A	1,5
PR122A	2,5
PR123A	3,5
PR124A	4,5
PR125A	5,5
PR126A	6,5

Pilar Recto Ø3,30
Altura de muñón: H6



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR127A	0,8
PR128A	1,5
PR129A	2,5
PR130A	3,5
PR131A	4,5
PR132A	5,5
PR133A	6,5

Pilar Recto Ø4,50
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR134A	0,8
PR135A	1,5
PR136A	2,5
PR137A	3,5
PR138A	4,5
PR139A	5,5
PR140A	6,5


Pilar Recto Ø4,50
Altura de muñón: H6



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR141A	0,8
PR142A	1,5
PR143A	2,5
PR144A	3,5
PR145A	4,5
PR146A	5,5
PR147A	6,5


Pilar Angulado 15° Ø3,30
Altura de muñón: H4

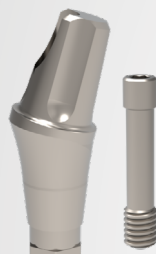

0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA022A	2,5
PA023A	3,5
PA024A	4,5

Pilar Angulado 15° Ø3,30
Altura de muñón: H6

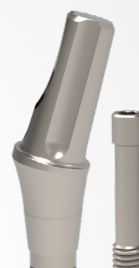

0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA025A	2,5
PA026A	3,5
PA027A	4,5

Pilar Angulado 15° Ø4,50
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA034A	2,5
PA035A	3,5
PA036A	4,5


Pilar Angulado 15° Ø4,50
Altura de muñón: H6



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA037A	2,5
PA038A	3,5
PA039A	4,5


Pilar Angulado 25° Ø3,30
Altura de muñón: H4

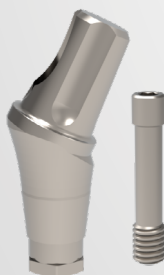

0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA028A	2,5
PA029A	3,5
PA030A	4,5

Pilar Angulado 25° Ø3,30
Altura de muñón: H6

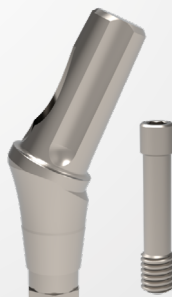

0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA031A	2,5
PA032A	3,5
PA033A	4,5


Pilar Angulado 25° Ø4,50
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA040A	2,5
PA041A	3,5
PA042A	4,5

Pilar Angulado 25° Ø4,50
Altura de muñón: H6

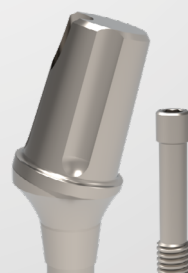


0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PA043A	2,5
PA044A	3,5
PA045A	4,5

Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,035"

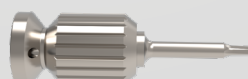

COD: DM001A - Corto
COD: DM002A - Largo

Cementado

Pilar Recto Macizo Ø3,30
Altura de muñón: H4



0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR084A	0,8
PR085A	1,5
PR086A	2,5
PR087A	3,5
PR088A	4,5
PR089A	5,5
PR090A	6,5

Pilar Recto Macizo Ø3,30
Altura de muñón: H6



0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR091A	0,8
PR092A	1,5
PR093A	2,5
PR094A	3,5
PR095A	4,5
PR096A	5,5
PR097A	6,5

Pilar Recto Macizo Ø4,50
Altura de muñón: H4



0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR098A	0,8
PR099A	1,5
PR100A	2,5
PR101A	3,5
PR102A	4,5
PR103A	5,5
PR104A	6,5

Pilar Recto Macizo Ø4,50
Altura de muñón: H6



0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR105A	0,8
PR106A	1,5
PR107A	2,5
PR108A	3,5
PR109A	4,5
PR110A	5,5
PR111A	6,5

UCLA de Pilar Ø3,30



Código	Altura de Muñón [mm]
UC039A	H4
UC040A	H6

UCLA de Pilar Ø4,50



Código	Altura de Muñón [mm]
UC041A	H4
UC042A	H6

Transferencia corona cemento-atornillado

Transfer Cubeta Abierta
COD: TF034A




TR014A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo de implante
COD: AN030A



Transferencia corona cementada

Transfer de Pilar Ø3,30

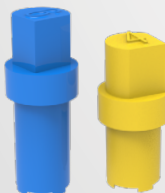


Código	Altura de Muñón [mm]
TF028A	H4
TF029A	H6

Análogo de Pilar Ø3,30



Código	Altura de Muñón [mm]
AN025A	H4
AN026A	H6

Transfer de Pilar Ø4,50

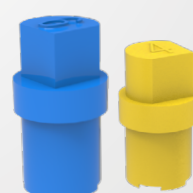

Código	Altura de Muñón [mm]
TF030A	H4
TF031A	H6


Análogo de Pilar Ø4,50



Código	Altura de Muñón [mm]
AN027A	H4
AN028A	H6

Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,035"

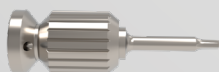


COD: DM001A - Corto
COD: DM002A - Largo

Llave criquet dinamométrica

Punta para torquímetro 0,048"



COD: PQ001A - Corto
COD: PQ002A - Medio
COD: PQ003A - Largo

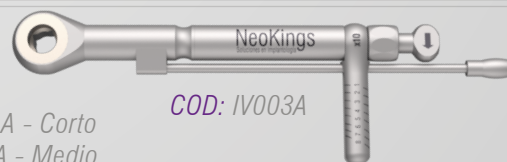

COD: IV003A

Cemento-atornillado

Ti Base Antirotacional Ø3,30
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR170A	1,5 mm
PR171A	2,5 mm
PR172A	3,5 mm

Ti Base Antirotacional Ø4,50
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR176A	1,5 mm
PR177A	2,5 mm
PR178A	3,5 mm

Ti Base Rotacional Ø3,30
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR182A	1,5 mm
PR183A	2,5 mm
PR184A	3,5 mm

Ti Base Rotacional Ø4,50
Altura de muñón: H4



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR188A	1,5 mm
PR189A	2,5 mm
PR190A	3,5 mm

Ti Base Antirotacional Ø3,30
Altura de muñón: H6



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR173A	1,5 mm
PR174A	2,5 mm
PR175A	3,5 mm

Ti Base Antirotacional Ø4,50
Altura de muñón: H6



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR179A	1,5 mm
PR180A	2,5 mm
PR181A	3,5 mm


Ti Base Rotacional Ø3,30
Altura de muñón: H6



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR185A	1,5 mm
PR186A	2,5 mm
PR187A	3,5 mm

Ti Base Rotacional Ø4,50
Altura de muñón: H6

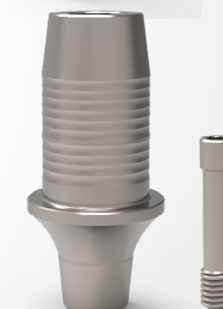

0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	Altura gingival
PR191A	1,5 mm
PR192A	2,5 mm
PR193A	3,5 mm

Trasferencia

Scan Body CM Corto
COD: TF035A

L=10 mm



0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Scan Body CM Largo
COD: TF036A

L=14 mm




0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Análogo Scan Body CM
COD: AN038A



Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,035"

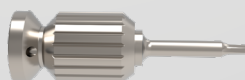

COD: DM001A - Corto
COD: DM002A - Largo

Transferencia Digital

Scan Body Pilar Unitario CM.
COD: TF046A



TR049A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo Scan Body Pilar Unitario CM.
COD: AN036A



Corona cemento-atornillada

Ti Base Pilar Unitario CM.
COD: PR230A



TR049A
0,048"
Torque manual:
15 N.cm

Corona atornillada

UCLA Pilar Unitario CM.
COD: UC046A



TR049A
0,048"
Torque de Pre-carga: 10 N.cm
Torque de Carga: 15 N.cm


Transferencia Analógica

Transfer Cubeta Abierta Pilar Unitario CM.
COD: TF047A




TR049A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Transfer Cubeta Cerrada Pilar Unitario CM.
COD: TF048A

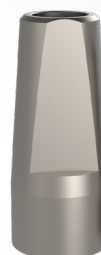


TR049A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo Pilar Unitario CM.
COD: AN040A

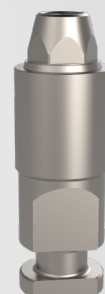

Cicatrización

Tapón Cicatrizal Pilar Unitario CM.
COD: CI113A

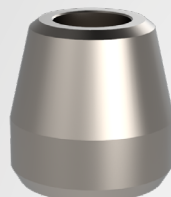

TR049A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Provisorio Pilar Unitario CM.
COD: PR229A



TR049A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Intermediario Unitario

Pilar Unitario CM




Plataforma
Ø4,8mm
Unitaria
0,062"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR223A	0,8
PR224A	1,5
PR225A	2,5
PR226A	3,5
PR227A	4,5
PR228A	5,5

Instrumental de colocación

Llave de transporte

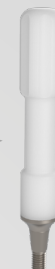

Punta de Torquimetro

Hex 0,062"

PQ048A - Corto
PQ049A - Largo

Instrumental de colocación

Destornillador manual

0,048"



DM003A - Corto
DM004A - Largo



Torque máximo:
32 N.cm

TR047A
0,035"
Torque manual:
15 N.cm

TR047A
0,035"
Torque manual:
15 N.cm

Código	H [mm]	Ø [mm]
PR113A	0.8	4.75
PR114A	1.5	4.75
PR115A	2.5	4.75
PR116A	3.5	4.75
PR117A	4.5	4.75
PR118A	5.5	4.75

PA052A	2.5	4.75
PA053A	3.5	4.75
PA054A	4.5	4.75

PA055A	2.5	4.75
PA056A	3.5	4.75
PA057A	4.5	4.75

Instrumental de colocación



Instrumental de colocación



DM001A - Corto
DM002A - Largo

COD: CI115A




TR042A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

COD: PR112A



TR042A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

COD: TF027A

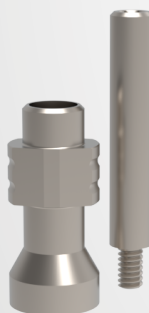

TR044A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

COD: AN024A



COD: UC030A



TR042A
0,048"
Torque de Pre-carga:
10 N.cm
Torque de Carga:
15 N.cm

COD: TF037A



TR042A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

COD: AN039A



COD: PR194A



TR042A
0,048"
Torque manual:
15 N.cm


Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,048"



COD: DM003A - Corto
COD: DM004A - Largo

Destornillador manual 0,035"

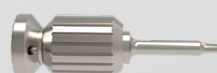

COD: DM001A - Corto
COD: DM002A - Largo



TR052A
 0,048"
 Torque manual:
 10 N.cm

Análogo Scan Body Micro
Multi Unit
COD: AN042A



Corona cemento-atornillada


Ti Base Micro Multi Unit
COD: PR238A



TR052A
 0,048"
 Torque manual:
 15 N.cm

Instrumental de colocación

Destornillador manual
 0,048"

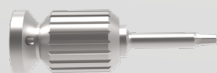


DM003A - Corto
DM004A - Largo

UCLA Micro Multi Unit
COD: UC048A



TR052A
 0,048"
 Torque de Pre-carga: 10 N.cm Torque de Carga: 15 N.cm

Transfer Micro Multi Unit
COD: TF049A

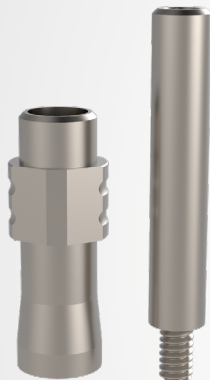

TR053A
 0,048"
 Torque manual:
 10 N.cm

Análogo Micro Multi Unit
COD: AN041A



Tapón Cicatrizal Micro
Multi Unit
COD: CI114A



TR052A
 0,048"
 Torque manual:
 10 N.cm

Provisorio Micro Multi
Unit
COD: PR237A



TR052A
 0,048"
 Torque manual:
 10 N.cm

Pilar Micro Multi
Unit

Torque máximo:
32 N.cm

Plataforma



Múltiple



Código	H [mm]	Ø [mm]
PR231A	0.8	3.5
PR232A	1.5	3.5
PR233A	2.5	3.5
PR234A	3.5	3.5
PR235A	4.5	3.5
PR236A	5.5	3.5

Instrumental de colocación



*Destornillador
manual para MU
DM011A*




Llave de Toque
para MU
PQ045A

Ball Attached CM Ø3,30 mm



Torque: 20 N.cm
Cazoleta: BT026A

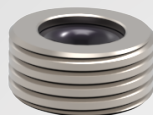


Código	Altura Gingival [mm]
BT044A	H0,8
BT045A	H1,5
BT046A	H2,5
BT047A	H3,5
BT048A	H4,5
BT049A	H5,5
BT050A	H6,5

Ball Attached CM Ø4,50 mm



Torque: 20 N.cm
Cazoleta: BT026A

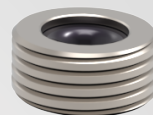

Código	Altura Gingival [mm]
BT051A	H0,8
BT052A	H1,5
BT053A	H2,5
BT054A	H3,5
BT055A	H4,5
BT056A	H5,5
BT057A	H6,5

Instrumental de colocación


Llave de torque Ball Attached



Llave criquet dinamométrica



PQ015A

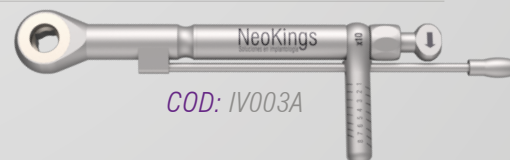

COD: IV003A



Instrumental de la caja

- Inicial

Código	Descripción	Cantidad
DO012A	Bisturí Circular Ø4,1	1
FRE001A	Fresa Lanza Ø2 x 20mm	1
FRE005A	Fresa Helicoidal Ø2 x 20mm	1
IV023A	Paralelizadores	4

- Fresas Cónicas

FRC060	ØN°1 x 8,5mm	1	FRC065	ØN°2 x 8,5mm	1
FRC061	ØN°1 x 10mm	1	FRC066	ØN°2 x 10mm	1
FRC062	ØN°1 x 11,5mm	1	FRC067	ØN°2 x 11,5mm	1
FRC063	ØN°1 x 13mm	1	FRC068	ØN°2 x 13mm	1
FRC064	ØN°1 x 15mm	1	FRC069	ØN°2 x 15mm	1
FRC070	Ø3,30 x 8,5mm	1	FRC075	Ø3,75 x 8,5mm	1
FRC071	Ø3,30 x 10mm	1	FRC076	Ø3,75 x 10mm	1
FRC072	Ø3,30 x 11,5mm	1	FRC077	Ø3,75 x 11,5mm	1
FRC073	Ø3,30 x 13mm	1	FRC078	Ø3,75 x 13mm	1
FRC074	Ø3,30 x 15mm	1	FRC079	Ø3,75 x 15mm	1
FRC080	Ø4,20 x 8,5mm	1	FRC085	Ø5,00 x 8,5mm	1
FRC081	Ø4,20 x 10mm	1	FRC086	Ø5,00 x 10mm	1
FRC082	Ø4,20 x 11,5mm	1	FRC087	Ø5,00 x 11,5mm	1
FRC083	Ø4,20 x 13mm	1	FRC088	Ø5,00 x 13mm	1
FRC084	Ø4,20 x 15mm	1	FRC089	Ø5,00 x 15mm	1

- Corticales

Código	Descripción	Cantidad
FRE029A	Fresa Cortical Ø3,3	1
FRE030A	Fresa Cortical Ø3,75	1
FRE031A	Fresa Cortical Ø4,2	1
FRE032A	Fresa Cortical Ø5	1

- Colocación

DO016A	Llave de Transporte CM para Contraángulo	1
IV003A	Llave Cricquet Dinamométrica de 0 a 80 Ncm	1
PQ035A	Punta de Transporte CM Corto	2
PQ036A	Punta de Transporte CM Largo	1


- Expandores

PQ016A	Expansor con Rosca Ø1,6 a Ø2,9	1
PQ017A	Expansor con Rosca Ø1,9 a Ø3,3	1
PQ018A	Expansor con Rosca Ø2,4 a Ø3,7	1
PQ019A	Expansor con Rosca Ø2,8 a Ø4	1
IV006A	Mango para Expandores con Encastre Cuadrado	1


- Accesorios

DO007A	Prolongador de Fresa	1
DM002A	Destornillador Manual Hexagonal 0,035" Largo	1
DM013A	Destornillador Manual con Encastre Cuadrado 4x4	1
FRE003A	Fresa Piloto Ø2 a Ø3 x 20mm	1
IV029A	Medidor de profundidad CM	1
IV004A	Sonda de Profundidad	1
PQ002A	Punta Hexagonal 0,048" Media	1
PQ011A	Prolongador para Cricquet Conexión 4x4 Corto	1
DM003A	Destornillador Manual Hexagonal 0,048" Corto	1


HUESO TIPO III/IV

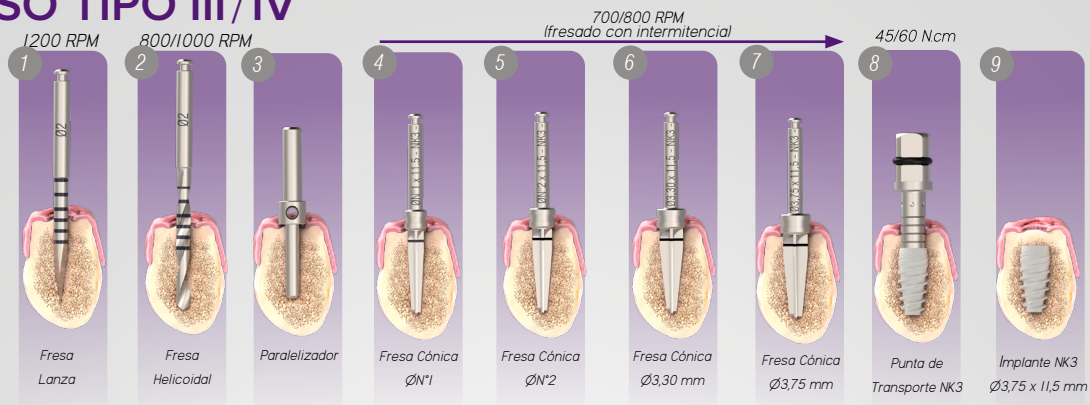

HUESO TIPO I/II

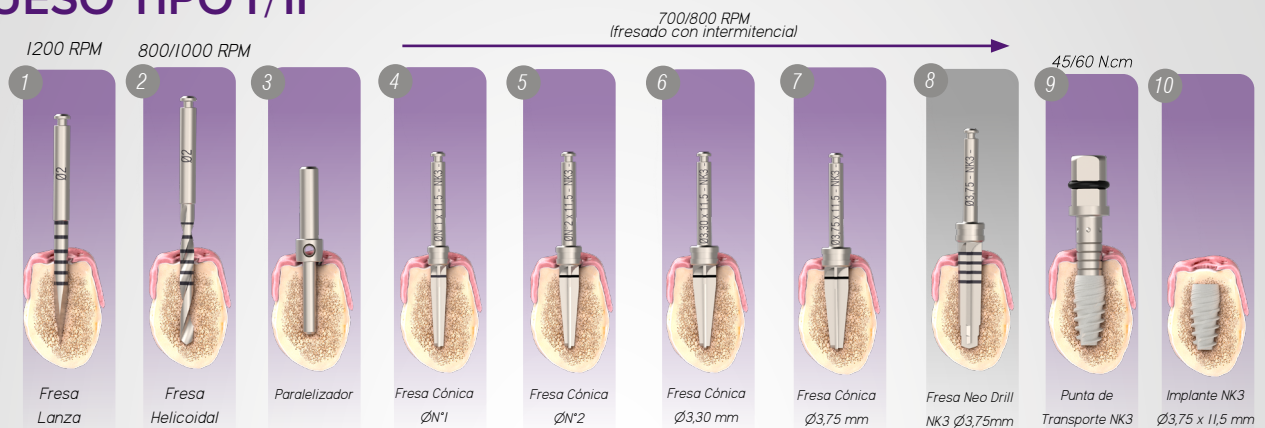

EXPANSORES

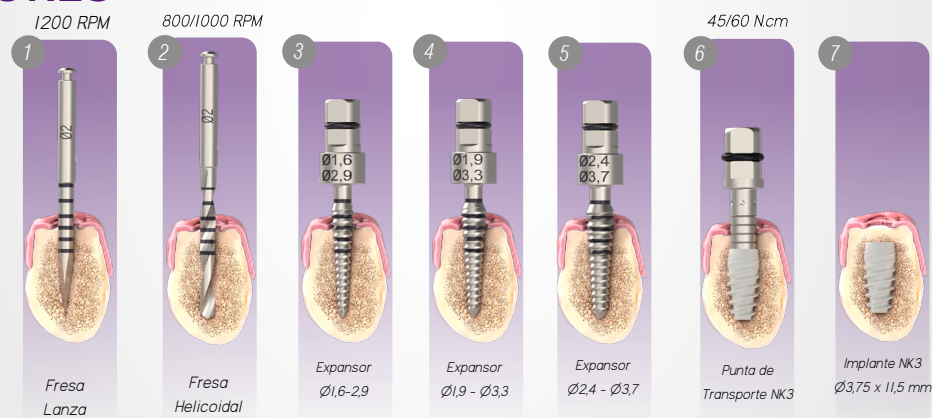

Referencia de grabados y ranuras en instrumental



NeoGuide



Instrumental de la caja

- Inicial

Código	Descripción	Cantidad
DO031A	Rectificador Ø4,3	1
DO032A	Rectificador Ø5,3	1
DO030A	Bisturí Circular Ø4,3	1
FRE025A	Fresa con Avellanador Ø2	1
FRE026A	Fresa para Pines Ø1,6	1
IV040A	Pin de Fijación	3
PQ042A	Pin de Fijación Oclusal	4

- Fresado

FRC005	Ø2,5 x 8,5mm	1	FRC010	Ø3,1 x 8,5mm	1
FRC006	Ø2,5 x 10mm	1	FRC011	Ø3,1 x 10mm	1
FRC007	Ø2,5 x 11,5mm	1	FRC012	Ø3,1 x 11,5mm	1
FRC008	Ø2,5 x 13mm	1	FRC013	Ø3,1 x 13mm	1
FRC009	Ø2,5 x 15mm	1	FRC014	Ø3,1 x 15mm	1
FRC015	Ø3,30 x 8,5mm	1	FRC020	Ø3,75 x 8,5mm	1
FRC016	Ø3,30 x 10mm	1	FRC021	Ø3,75 x 10mm	1
FRC017	Ø3,30 x 11,5mm	1	FRC022	Ø3,75 x 11,5mm	1
FRC018	Ø3,30 x 13mm	1	FRC023	Ø3,75 x 13mm	1
FRC019	Ø3,30 x 15mm	1	FRC024	Ø3,75 x 15mm	1
FRC025	Ø4,20 x 8,5mm	1			
FRC026	Ø4,20 x 10mm	1			
FRC027	Ø4,20 x 11,5mm	1			
FRC028	Ø4,20 x 13mm	1			
FRC029	Ø4,20 x 15mm	1			

- Colocación

Código	Descripción	Cantidad
IV037A	Mango colocador de Anillas	1
IV003A	Llave Crique Dinamométrica de 0 a 80 Ncm	1
PQ043A	Punta de Transporte HI para Torquímetro	1
PQ044A	Punta de Transporte CM para Torquímetro	1
DO033A	Punta de Transporte HI para Contraangulo	1
DO034A	Punta de Transporte CM para Contraangulo	1

- Corticales

FRE027A	Fresa Piloto Ø3,65	1
FRE028A	Fresa Piloto Ø4,00	1


- Expansores

PQ038A	Expansor para Cirugía Guiada Ø1,6 a Ø2,9	1
PQ039A	Expansor para Cirugía Guiada Ø1,9 a Ø3,3	1
PQ040A	Expansor para Cirugía Guiada Ø2,4 a Ø3,7	1
PQ041A	Expansor para Cirugía Guiada Ø2,8 a Ø4	1


- Accesorios

PQ003A	Punta Hexagonal 0,048" Larga	1
DM004A	Destornillador Manual Hexagonal 0,048" Largo	1
IV038A	Anilla Ø4,3	6
IV039A	Anilla Ø2,8	3


HUESO TIPO III/IV

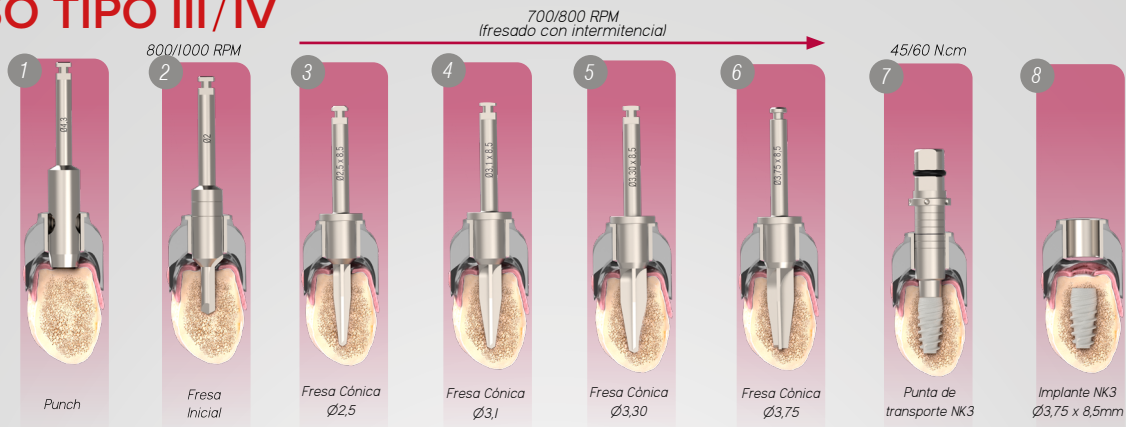


HUESO TIPO I/II

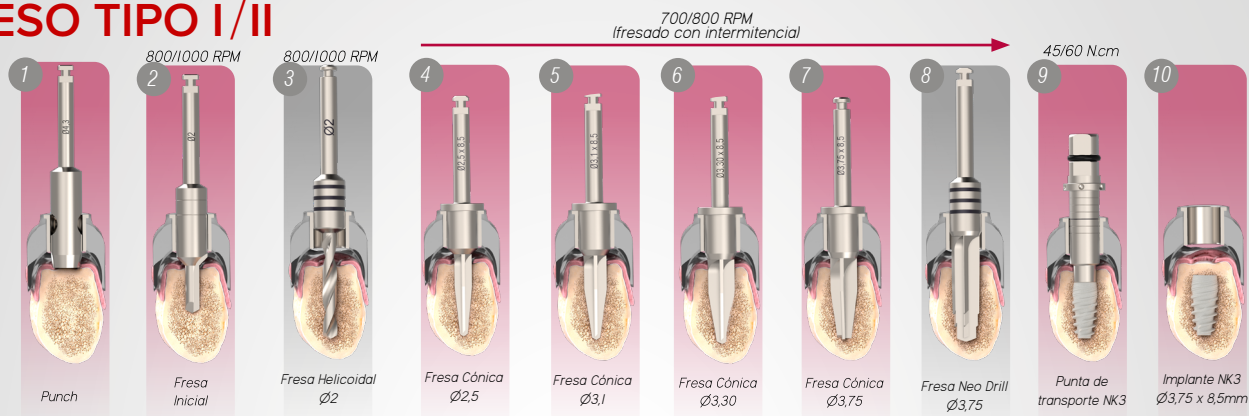

EXPANSORES

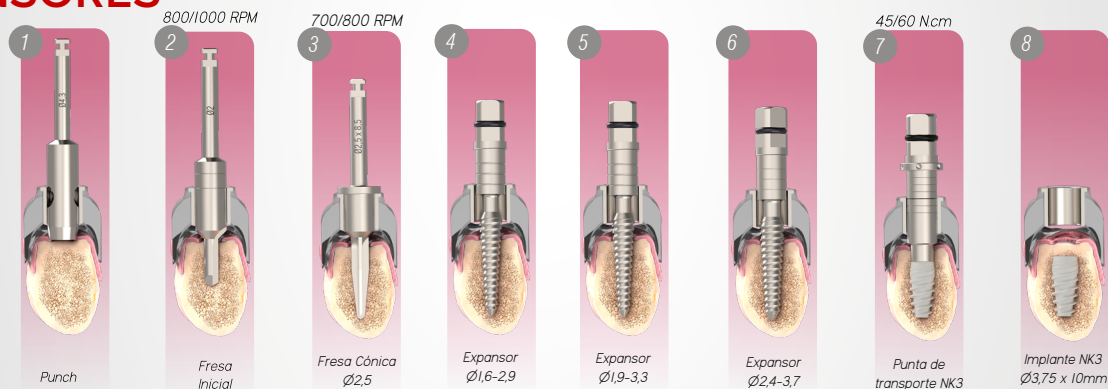

Protocolos con desplazamiento de anilla a 9mm:

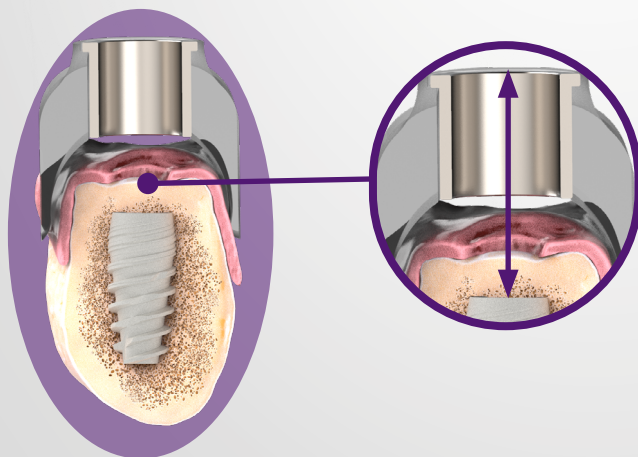


Anilla Ø4,3 para implantes y pines de fijación oclusal



IV038A

Anilla Ø2,8 para pines de fijación vestibular

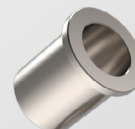

IV039A

Referencia de líneas en Instrumental:





Fresa Perfiladora Ósea CM PROXIMAMENTE


Fresa
FRE047A



+

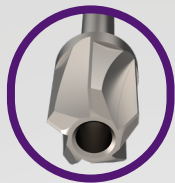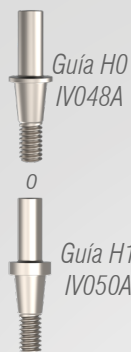

Neo Drill NK3

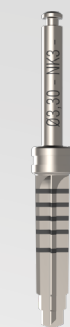

Ø3,30
FRE038A




Ø3,75
FRE039A



Ø4,20
FRE040A



Ø5,00
FRE041A

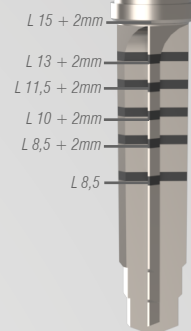

Extractor de Implantes


PQ020A



Extractor de Pilares CM

NUEVO

DM017A

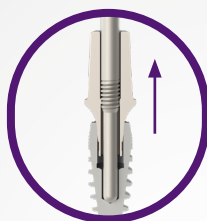

Medidor de Profundidad

IV029A



Repasador de Rosca

M1,80

PQ013A



Destornillador Manual 0,035"



DM001A = Corto = 11,2mm

DM002A = Largo = 17,2mm

L
Ø = 1,75